



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals
and Communities



L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

RELAX

POLTRONE RELAX



Vario Free



MR5078 Vario Free Plus

Poltrona su ruote ad altezza variabile, movimenti indipendenti con pedana

Relax armchair on wheels with adjustable height, independent movements with footrest

Vario Sincro



MR5076 Vario Sincro Plus

Poltrona su ruote ad altezza variabile, movimenti sincronizzati con pedana

Relax armchair on wheels with adjustable height, synchronized movements with footrest

Una serie completa di poltrone Relax per rispondere a specifiche tipologie di impiego utilizzabili sia in ambiente ospedaliero che in casa di riposo.

Tutti i modelli sono realizzati con una robusta struttura in acciaio, sedile e schienale in legno multistrato di faggio, imbottitura ignifuga a densità differenziata e conformata anatomicamente per consentire il massimo del comfort, braccioli abbattibili o inclinabili per agevolare lo spostamento del paziente in versione imbottita o in poliuretano morbido, regolazione dello schienale e del poggiatesta mediante pompa a gas.

Versione con pedana estraibile con ruote o senza e, a seconda del modello, possono essere aggiunti accessori come il tavolino pranzo, asta flebo, poggiatesta.

This line of relax armchair has been studied to answer to the different ways of use, both hospitals and resting homes.

All the models are produced with a strong structure made of steel; the inner seat and the inner backrest are made of laminate multilayer. The padding is fireproof with different thickness to be more comfortable; the armrest are tilting to make easier the patient's movements and they can be padded or made of soft polyurethane. The backrest and the legrest are adjustable through gas spring.

There is a version with or without extractable footrest, and according to the model it is possible to add different accessories such as the table, the I.V stand and the headrest.

AX

Free



MR5068 Free Plus

Poltrona su ruote, movimenti indipendenti con pedana

Relax armchair on wheels, independent movements with footrest



MR5065 Free

Poltrona su ruote, movimenti indipendenti senza pedana

Relax armchair on wheels, independent movements without footrest

Sincro



MR5066 Sincro Plus

Poltrona su ruote, movimenti sincronizzati con pedana

Relax armchair on wheels, synchronized movements with footrest



MR5063 Sincro

Poltrona su ruote, movimenti sincronizzati senza pedana

Relax armchair on wheels, synchronized movements without footrest



MR5062 Sincro Basic

Poltrona su piedini, movimenti sincronizzati

Relax armchair on feet, synchronized movements

Vario

MR5078

Movimento indipendente con pedana
Independent movement with footrest

MR5076

Movimento sincronizzato con pedana
Synchronized movements with footrest

A completamento della serie poltrone RELAX Givas presenta la nuova Vario Free Plus specifica per impiego Ospedaliero e Casa di Riposo, realizzata con una robusta struttura in acciaio verniciato, sedile e schienale con supporto in multistrato di faggio, imbottitura schiumata, ignifuga Viscoelastica Termoformante per consentire il massimo confort a prevenzione del decubito, braccioli realizzati in poliuretano morbido, abbattibili a filo seduta per agevolare lo spostamento del paziente.

Coperture del basamento e delle sedute in ABS termoformato per agevolare le operazioni di pulizia. Comandi bilaterali indipendenti o sincronizzati per schienale e gambale con pompa a gas, comando di elevazione mediante pedale bilaterale con pompa oleodinamica.

Completa di coppia pedane ruotabili con sistema di freno automatico per la discesa del paziente. Alla base 4 ruote girevoli e piroettanti di cui 2 posteriori con freno simultaneo e 1 direzionale.

Tutti i materiali impiegati sono trattati con additivo antibatterico INTERPON

To complete the line of relax armchairs, GIVAS SRL has created the new Vario Free Plus, a specific armchair for hospitals and resting homes. It is realized with a strong structure made of varnished steel, the backrest and the seat have a support of multilayer beech, the padding is fireproof viscoelastic and thermoformed in order to give more comfort to the patient and preventing decubitus problems. The armrest are made of soft polyurethane and tilting to make easier patient's movement. The covering part of basement is made of thermoformed ABS to facilitate cleaning procedures. Bilateral commands, independent or synchronized for the backrest and the legrest, moved by a gas spring; the height is adjusted through a bilateral pedal moved by an hydraulic pump. The armchair is equipped with a couple of rotating footrest, equipped with spring system avoiding tipping of the armchair on patient descent. At the base 4 swivelling wheels, two of them put on the back side with simultaneous and directional brake.

All the material used are treated with anti-bacterial INTERPON



4

RELAX



Particolare del maniglione di spinta e scocca in ABS termoformato dello schienale

Detail of the push handle and backrest made of thermoformed ABS



Leve bilaterali indipendenti per i comandi dello schienale e del poggiatesta

Independents laterals levers for the movement of the backrest and the legrest.




Pulsante di sblocco per la regolazione verticale del bracciolo

Releasing button for the armrest adjustment.



Bracciolo regolabile in 6 posizioni
Armrest adjustable to 6 positions.

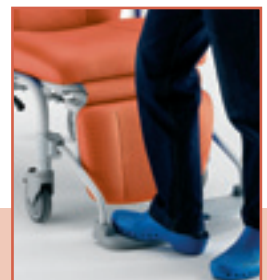

Antiribaltamento
Anti-upsetting

DATI TECNICI

Ingombro posizione eretta: cm 75x95x128
Ingombro posizione distesa: cm 75x177
Larghezza sedile: cm 54
Profondità sedile: cm 45
Altezza minima sedile: cm 55
Altezza massima sedile: cm 88
Regolazione schienale: 100° - 162°
Ruote: Ø 125 mm
Portata: kg 120
Peso: kg 52

TECHNICAL DETAILS

Dimensions with upright position cm 75x95x128
Dimensions with extended position cm 75x177
Seat width: cm 54
Seat depth: cm 45
Minimum height of seat: cm 55
Maximum height of seat: cm 88
Backrest inclination: 100° - 162°
Wheels: Ø 125 mm
Maximum load: kg 120
Weight: kg 52



MR5078

Poltrona su ruote ad altezza variabile, movimenti indipendenti con pedana
Relax armchair on wheels with adjustable height, independent movements with footrest

MR5076

Poltrona su ruote ad altezza variabile, movimenti sincronizzati con pedana
Relax armchair on wheels with adjustable height, synchronized movements with footrest



MZ5049

Asta flebo in tubo di acciaio cromato

I.V. stand made of chromed steel



MZ5063

Morsetto per asta flebo dx
Right clamp for I.V. stand



MZ5062

Porta sacca urina
Urine bag holder



MZ5061

Vassoio servipranzo in plastica stampata
Serving table



MZ5066

Coppia guide in acciaio cromato con morsetto per vassoio servi pranzo

Couple of runners made of chromed steel, complete with clamp, for tray



MZ5059

Poggiatesta anatomico regolabile in altezza
Anatomic headrest with adjustable height

MZ5064

Morsetto per asta flebo sx
Left clamp for I.V. stand

Free

MR5068

Movimento indipendente con pedana
Independent movement with footrest

Poltrona Relax ad altezza fissa dotata di pedana estraibile e meccanismo di inclinazione dello schienale con movimento indipendente dal poggiatesta, ovvero è possibile inclinare indipendentemente solo lo schienale o il poggiatesta. L'inclinazione indipendente è comandata da 2 molle a gas azionate da 2 leve laterali situate a fianco della seduta. La seduta, lo schienale ed il poggiatesta sono imbottiti in espanso a densità differenziata e rivestiti in similpelle ignifuga in classe 1/IM lavabile e disinfettabile, lo schienale è completo di maniglione di spinta e supporto lombare interno. I braccioli realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido sono abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza. La pedana è ruotabile e garantisce facilità nel trasporto dell'ospite. La poltrona è costruita con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con alla base 4 ruote piroettanti di cui 2 anteriori direzionali e 2 posteriori con freno.

MR5065

Movimento indipendente senza pedana
Independent movement without footrest



Relax armchair with fixed height and reclining foot rest; equipped also with separate movement of the backrest and the legrest. The separate inclination is made through two gas spring moved by lateral levers.

The seat, the legrest and the backrest are padded following different thickness and they are upholstered with simil leather which is fireproof class 1 IM, washable and disinfettable. The backrest is equipped with push handle and inner lumbar support.

The armrests are covered with soft integral polyurethane; they are adjustable reaching the seat level.

The footrest is reclining and make easy the patient transport.

Structure made of tubular varnished steel. At the base there are 4 swivelling wheels, 2 of them are directional and frontal, and 2 with brake on the back side.

6

RELAX



Particolare del maniglione di spinta e scocca in ABS termoformato dello schienale

Detail of the push handle and backrest made of thermoformed ABS



Leve bilaterali indipendenti per i comandi dello schienale e del poggiatesta

Independents lateral levers for the movement of the backrest and the legrest.



Pulsante di sblocco per la regolazione verticale del bracciolo

Releasing button for the armrest adjustment.



Bracciolo regolabile in 6 posizioni
Armrest adjustable to 6 positions.



MZ5051

Morsetto per asta flebo
Clamp for I.V stand

DATI TECNICI

Ingombro posizione eretta: cm 74x90x127 h
Ingombro posizione distesa: cm 74x170x73 h
Larghezza sedile: cm 51
Altezza sedile da terra: cm 52
Altezza bracciolo da terra: cm 73
Regolazione schienale: 100° - 162°
Ruote Ø 125 mm
Portata: kg 120
Peso: kg 32

TECHNICAL DETAILS

Dimensions with upright position: cm 74x 90x127 h
Dimensions with extended position: cm 74x170x73 h
Seat width: cm 51
Seat height from the floor: cm 52
Armrest height from the floor: cm 73
Backrest inclination: 100° - 162°
Wheels: Ø 125 mm
Maximum load: kg 120
Weight: kg 32



MR5068

Poltrona su ruote, movimenti indipendenti con pedana
Relax armchair on wheels, independent movements with footrest



MR5065

Poltrona su ruote, movimenti indipendenti senza pedana
Relax armchair on wheels, independent movements without footrest



MZ5049

Asta flebo in tubo di acciaio cromato

I.V. stand made of chromed steel



MZ5062

Porta sacca urina
Urine bag holder



MZ5061

Vassoio servipranzo in plastica stampata
Serving table



MZ5066

Coppia guide in acciaio cromato con morsetto per vassoio servi pranzo
Couple of runners made of chromed steel, complete with clamp, for tray



MZ5059

Poggiatesta anatomico regolabile in altezza
Anatomic headrest with adjustable height



Pedana estraibile in ABS
Extractable footrest

Sincro

MR5066

Movimento sincronizzato con pedana
Synchronised movement with footrest

MR5063

Movimento sincronizzato senza pedana
Synchronized movement without footrest

Costruita con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche questa relax è dotata di meccanismo di inclinazione dello schienale sincronizzato con il poggiatesta.

L'inclinazione è comandata da una molla a gas azionata da una leva laterale situata a fianco della seduta. La seduta, lo schienale ed il poggiatesta sono imbottiti in espanso a densità differenziata e rivestiti in similpelle ignifuga in classe 1/IM lavabile e disinfettabile, lo schienale è completo di maniglione di spinta e supporto lombare interno.

I braccioli realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido sono abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza.

La pedana è ruotabile e garantisce facilità nel trasporto dell'ospite.

La poltrona è costruita con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con alla base 4 ruote piroettanti di cui 2 anteriori direzionali e 2 posteriori con freno.



Blood donor armchair with compact dimensions. It is equipped with four wheels; two of them are in the front side and are fixed, two are on the back side and they are swivelling and with brake. The frame is made of tubular steel varnished with epoxy powders; the seat is padded with different thickness and upholstered with soft fireproof leatherette; the back part of the backrest is made of thermoformed ABS.

The backrest is also equipped with lumbar support and it can be reclined by a lever which moves a gas spring; this movement is synchronized with the legrest.

The armrests are padded and upholstered, shaped for a better position of the arms and adjustable in all the positions.

This is possible thanks to a special clamp with different sectors; to allow an easy movement for the patient to seat, it is possible to completely recline the armrest to the back side.



Particolare del maniglione di spinta e scocca in ABS termoformato dello schienale

Detail of the push handle and backrest made of thermoformed ABS



Leva laterale per il comando sincronizzato dello schienale e poggiatesta

Lateral lever for the synchronized movement of the backrest and legrest.



Pulsante di sblocco per la regolazione verticale del bracciolo

Releasing button for the armrest adjustment.



Bracciolo regolabile in 6 posizioni
Armrest adjustable to 6 positions.



Pedana estraibile in ABS
Extractable footrest

DATI TECNICI

Ingombro posizione eretta: cm 74x90x127 h
Ingombro posizione distesa: cm 74x170x73 h
Larghezza sedile: cm 51
Altezza sedile da terra: cm 52
Altezza bracciolo da terra: cm 73
Regolazione schienale: 100° - 162°
Ruote Ø 125 mm
Portata: kg 120
Peso: kg 32

TECHNICAL DETAILS

Dimensions with upright position: cm 74x90x127 h
Dimensions with extended position: cm 74x170x73 h
Seat width: cm 51
Seat height from the floor: cm 52
Armrest height from the floor: cm 73
Backrest inclination: 100° - 162°
Wheels: Ø 125 mm
Maximum load: kg 120
Weight: kg 32



MR5066

Poltrone su ruote, movimenti sincronizzati con pedana
Relax armchair on wheels, synchronised movements with footrest

MR5063

Poltrona su ruote, movimenti sincronizzati senza pedana
Relax armchair on wheels, synchronized movements without footrest



MZ5049

Asta flebo in tubo di acciaio cromato

I.V. stand made of chromed steel



MZ5051

Morsetto per asta flebo
Clamp for I.V. stand



MZ5062

Porta sacca urina
Urine bag holder



MZ5061

Vassoio servipranzo in plastica stampata
Serving table



MZ5066

Coppia guide in acciaio cromato con morsetto per vassoio servi pranzo

Couple of runners made of chromed steel, complete with clamp, for tray



MZ5059

Poggiatesta anatomico regolabile in altezza
Anatomic headrest with adjustable height

Sincro Basic

MR5062

Movimento sincronizzato
Synchronized movement

Costruita con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche senza ruote, questa relax è dotata di meccanismo di inclinazione dello schienale sincronizzato con il poggiatesta. L'inclinazione è comandata da una molla a gas azionata da una leva laterale situata a fianco della seduta. La seduta, lo schienale ed il poggiatesta sono imbottiti in espanso a densità differenziata e rivestiti in similpelle ignifuga in classe 1/IM lavabile e disinfettabile, lo schienale è completo di maniglione di spinta e supporto lombare interno. I braccioli realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido sono regolabili in altezza.

This armchair is made of tubular varnished steel and it is equipped with synchronized movement of the backrest and the legrest. Instead of wheels it has four feet. The inclination is made through a gas spring moved by a lateral lever. The seat, the legrest and the backrest are padded following different thickness and they are upholstered with simil leather which is fireproof class 1 IM, washable and disinfettable. The backrest is equipped with push handle and inner lumbar support.

The armrests are covered with soft integral polyurethane; they are adjustable.



10
RELAX



Leva laterale sincronizzata per il comando dello schienale e del poggiatesta

Lateral lever for the synchronized movement of the backrest and legrest.



Pulsante di sblocco per la regolazione verticale del bracciolo

Releasing button for the armrest adjustment.



MZ5051

Morsetto per asta flebo
Clamp for I.V. stand

DATI TECNICI

Ingombro posizione eretta: cm 74x90x127 h
 Ingombro posizione distesa: cm 74x170x73 h
 Larghezza sedile: cm 51
 Altezza sedile da terra: cm 52
 Altezza bracciolo da terra: cm 73
 Regolazione schienale: 100° - 162°
 Ruote Ø 125 mm
 Portata: kg 120
 Peso: kg 32

TECHNICAL DETAILS

Dimensions with upright position: cm. 74x90x127 h
Dimensions with extended position: cm 74x170x73 h
Seat width: cm 51
Seat height from the floor: cm 52
Armrest height from the floor: cm 73
Backrest inclination: 100° - 162°
Wheels: Ø 125 mm
Maximum load: kg 120
Weight: kg 32



MZ5049

Asta flebo in tubo di acciaio cromato
 I.V. stand made of chromed steel



MZ5062

Porta sacca urina
 Urine bag holder



MZ5061

Vassoio servipranzo in plastica stampata
 Serving table



MZ5066

Coppia guide in acciaio cromato con morsetto per vassoio servi pranzo
 Couple of runners made of chromed steel, complete with clamp, for tray



MZ5059

Poggiatesta anatomico regolabile in altezza
 Anatomic headrest with adjustable height